

ALGEMEEN

De STREPA'LERT®-test is een specifiek immunologische test voor detectie van groep A β-streptokokken (bacteriën) bij infecties in de keel. Groep A – Infecties in de hals met β-hemolytische streptokokken (Streptococcus pyogenes) zijn de voornaamste bacteriële oorzaak van acute faryngitis. Een typische oorzaak van keelpijn is een virusinfectie, waarbij geen antibiotica helpen. Als je keelpijn een bacteriële oorzaak heeft (Strep. A), kan behandeling nodig zijn. Vaak zal je arts antibiotica voorschrijven om eventuele ernstige complicaties te voorkomen, zoals reumatische koorts of acute glomerulonefritis.

Opmerking – Lees voor gebruik de instructies nauwkeurig door.

Inhoud:

- Maak de verpakking pas open wanneer je bent klaar voor de test.**
- 1 steriele wattenstaafje
 - 1 lege reageerbuis
 - 1 flesje extractievloeistof nr. 1 (blauwe dop): 1 ml

| | |
|--|---|
| | Waarschuwing: H302: Schadelijk bij inslikken |
| | Opmerking: P. 264: Was je handen grondig. P. 270: Eet niet, drink niet en rook niet terwijl dit product wordt gebruikt. |

- 1 flesje extractievloeistof nr. 2 (groene dop): 1 ml
- 1 lege reageerbuis
- 1 houder van vormschuim (voor de reageerbuis)
- 1 handleiding

Resultaat aflezen

1. Positieve uitslag

Er verschijnen twee (2) rode/paarse strepen. De intensiteit van de strepen kan variëren. Deze uitslag betekent dat Strep A is gedetecteerd. Raadpleeg een arts.



2. Negatieve uitslag

Er verschijnt alleen een (1) rode streep (controlestreep) dicht bij het blauwe grippoppervlak. Deze uitslag betekent dat er geen Strep A kon worden gedetecteerd.



3. Mislukte uitslag

Als er geen streep of als er alleen een streep bij de pijlen verschijnt, is de test mislukt en moet je een nieuwe test doen.



Waarschuwingsinstructies en belangrijke informatie


Dit is een in-vitrozelftest, alleen voor uwendig gebruik. Niet inslikken. Lees voor gebruik de instructies nauwkeurig door. Het resultaat kun je alleen aflezen als je de instructies volgt zoals aangegeven. Volg alle instructies over gebruik, hoeveelheid bloed en verdunning.

Bewaren tussen +4°C en +30°C. Droog en beschermd tegen zonlicht bewaren. Mag niet worden gebruikt na de vervaldatum op de aluminium verpakking. De test mag niet worden gebruikt als de aluminium verpakking geopend is. De zelftest mag niet opnieuw worden gebruikt. Bewaar dit product buiten het bereik van kinderen en dieren. De buitenverpakking kan als karton/golfkarton worden ingezameld. De overige materialen moeten bij het restafval.

Niet geschikt voor kinderen onder de 2 jaar.


Als er vloeistoffen in contact komen met ogen, huid of slijmvliezen, spoel dan direct met stromend water en bel naar een medische hulplijn.

De vloeistoffen mogen absoluut niet worden ingeslikt. Raadpleeg onmiddellijk een arts als dat toch gebeurt. Neem deze bijsluiter mee en laat die aan het medisch personeel zien.

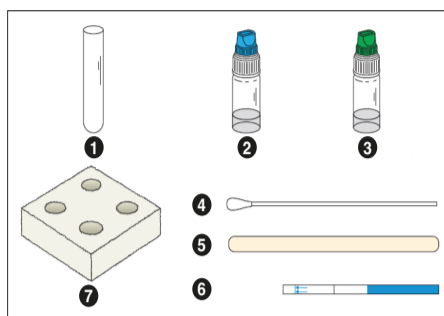

Ga als volgt te werk


1. Leg de test en de overige inhoud op een schoon en droog oppervlak.
2. Was je handen grondig met water en zeep. Droog je handen af.
3. Plaats de reageerbuis in een van de gaten van het vormschuim (fig. 1).
- **Doe het volgende met het wattenstaafje:**
4. Doe een proefafname met het wattenstaafje en de tongspatel.
- a/ Maak de verpakking met de tongspatel open en leg die binnen handbereik.
- b/ Maak de verpakking met het wattenstaafje open. Raak het katoen niet aan (fig. 2)

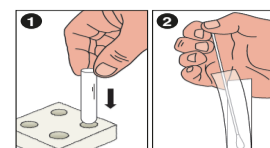

c/ Ga voor een spiegel staan, Buig je hoofd achterover en doe je mond open (fig. 3)

d/ Met behulp van de tongspatel: duw je tong omlaag, en wrijf met de andere de hand het wattenstaafje rond je keelamandelen/het geïrriteerde gebied. (fig. 4)

Stop het wattenstaafje in de reageerbuis (fig. 5).

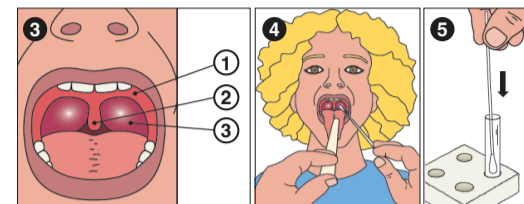

Informatie over faryngitis en antibioticabehandeling:
1. Online informatie: <https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fichesmaladies/streptocoques-b>.
2. Online informatie: <https://www.cdc.gov/antibioticuse/community/about/should-know.html>

VEDA-LAB
Rue de l'Expansion - ZAT du Londeau - Cerisé
BP 181 - 61006 ALENCON Cedex (France)

Steriel wattenstaafje en tongspatel: **STERILE EO**

Applied SA
ZI, route Pra de Plan - I-CH 1618 - Châtel Saint Denis (Switzerland)

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------------|--|-------------------|
| | Lees voor gebruik de instructies | | IVD Voor in vitro diagnosegebruik | | Niet hergebruiken |
| | Bewaren tussen +4° en +30°C | | LOT Batchnummer | | Vervaldatum |
| | Fabrikant | MD- 030090 m4 c – Herzien in januari 2022 | | | |


HANDLEIDING ZELFTEST STREPA'LERT® Zelftest




quicktest.be

Ga als volgt te werk

6. Doe eerst het flesje met de BLAUWE dop open (draai alleen de blauwe dop eraf en laat het witte onderste gedeelte zitten) gemerkt met een cijfer 1. Doe 6 druppels in de reageerbuis (fig. 6).
7. Doe vervolgens het flesje met de GROENE dop open (draai alleen de groene dop eraf en laat het witte onderste gedeelte zitten) gemerkt met een cijfer 2. Doe 6 druppels in de reageerbuis (fig. 7).

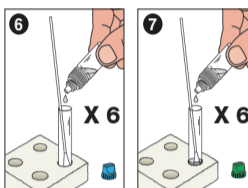

8. Roer het wattenstaafje rond in de reageerbuis (zo'n 10 keer.) Laat het wattenstaafje in de reageerbuis gedurende de incubatietijd van 2 tot maximaal 5 minuten. (Fig. 8)

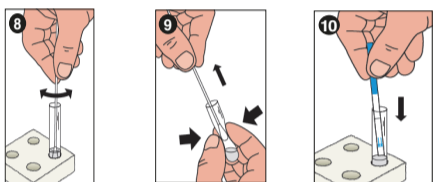

9. Met het wattenstaafje nog in de reageerbuis – haal de reageerbuis voorzichtig het vormschuim. Knip op de buis met het wattenstaafje ertussen. Op die manier blijft er zoveel mogelijk vloeistof achter in de reageerbuis. Gooi het wattenstaafje weg. Zet de reageerbuis terug in het vormschuim. N.B. – het wattenstaafje moet buiten het bereik van kinderen en dieren blijven wanneer je het weggooit. (Fig. 9)
10. Maak het aluminium zakje open en haal de teststrip eruit. Houd de teststrip op het blauwe gedeelte. Stop de teststrip met de pijlen omlaag in de reageerbuis. Laat de test 5 tot 10 minuten in de reageerbuis. (Fig. 10)
11. Haal de test eruit en lees de uitslag af. Interpreteer de uitslag niet na 10 minuten.

quicktest
YOU DESERVE TO KNOW

